

CARSON®

MicroBrite™ Plus

Microscope de poche éclairé par LED, 60-120x



MM-300

Félicitations pour avoir sélectionné votre nouveau microscope MicroBrite Plus ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Grossissement :	60x -120x	Poids :	59 g (sans pile)	Batterie :	1x pile AA (non incluse)
Diamètre de pupille de sortie :	10mm - 14mm	Dimensions :	5,84 x 3,05 x 9,40 cm		
Zoom optique :	2x	Éclairage :	LED		

INSTALLATION DE LA PILE

1. Glissez la porte de la pile



2. Installez 1 pile AA avec la polarité correcte et remplacez la porte de la pile.

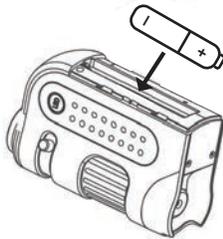

AVERTISSEMENT : Utilisez des piles alcalines seulement. Mélanger piles usagées et piles neuves, piles de marques différentes ou de types différentes peut provoquer des risques de fuite, de surchauffe ou d'explosion. Gardez piles à l'écart du feu ou de la chaleur excessive. Inspectez piles pour détecter la corrosion ou la fuite. Insérez piles en la direction indiquée. L'utilisation des piles rechargeables n'est pas recommandée.

UTILISATION DU MICROSCOPE

1. Placez l'objet de visualisation directement sous l'objectif.



2. Appuyez sur l'interrupteur LED pour allumer et éteindre – pour la fin de l'observation.



3. Ajustez la molette de zoom au grossissement souhaité.



4. Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit claire.



AVERTISSEMENT

- Pour éviter d'éventuelles lésions oculaires permanentes :
 - Ne regardez pas le soleil avec le microscope.
 - Ne placez pas le microscope éclairé directement sur l'œil humain.
- Retirez la pile avant de ranger le microscope pendant une période prolongée.
- L'appareil peut se réchauffer après une longue période d'utilisation. Ceci est normal et ne doit pas être considéré comme un défaut.

Service clients : Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter. Nous serons très heureux de vous assister.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'informations par rapport à la garantie,
visitez www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000